


3成分・低沸点有機ハロゲン化合物試験 採水方法について

- ① 給水栓を開き、十分な放流(5分間以上)を行ってください。
- ② フランびんの栓をとり、採水する水で中を2~3回すすいでください。(すすいだ水は捨てます)
- ③ 泡立てないように静かに採水してください。
(この時、びんから水をあふれさせてください)
- ④ びん内に気泡が入らないよう注意し、静かに栓をしてください。
- ⑤ 直射日光を避け保冷剤等で冷蔵保管し、採水後は速やかに受付場所へ搬入してください。

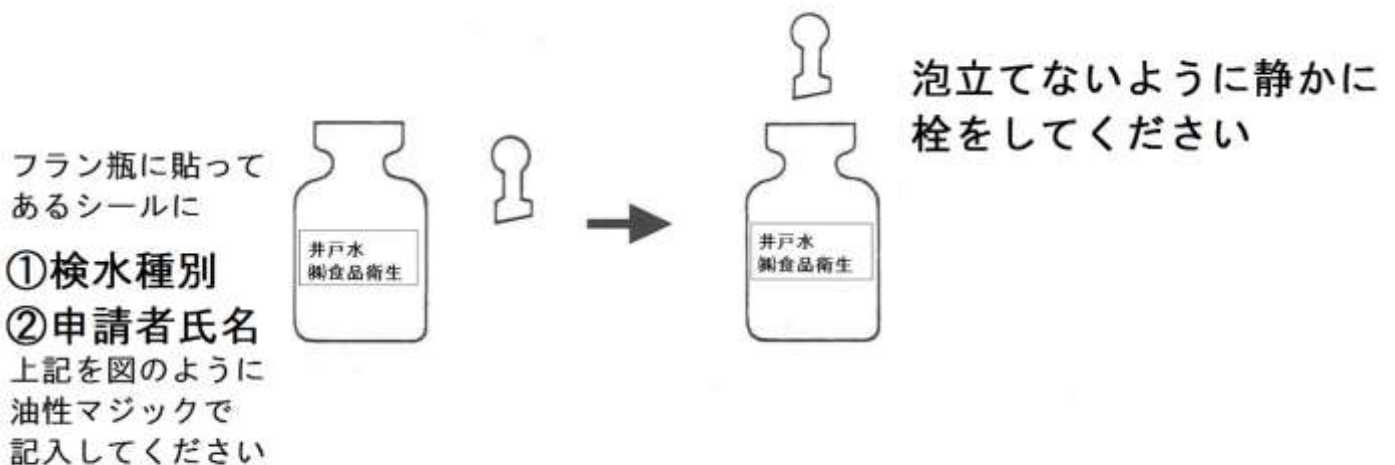

一般社団法人長野県食品衛生協会
厚生労働大臣登録検査機関
食品衛生試験研究所

TEL026-234-9001 / FAX026-234-5057